



# SUJECIONES ESMERILADAS DURAN®

Las sujeciones esmeriladas de nuestra línea de productos KECK™ son muy reconocidas y han demostrado su eficacia. Si los requisitos de seguridad aumentan, por ejemplo, durante la manipulación de sustancias peligrosas o al trabajar con presiones diferentes, las sujeciones esmeriladas DURAN® ofrecen una protección eficaz a la hora de evitar que la unión se suelte de forma involuntaria. Asimismo, las sujeciones esmeriladas DURAN® también ofrecen un sistema para desconectar uniones fijas, por lo que el peligro de que se rompa el vidrio y de que surjan riesgos como consecuencia se reduce a un mínimo.

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Manipulación de sustancias peligrosas
- Cuando existe el riesgo de que las sujeciones esmeriladas se queden atascadas, por ejemplo, cuando se trabaja sin grasa
- Para conexiones esmeriladas sometidas a cargas mecánicas debidas, por ejemplo, a la posición de montaje o a las vibraciones
- Para un cierre seguro de componentes esmerilados

## PROPIEDADES

- Vidrio de borosilicato 3.3
- Conexión muy segura
- Tan herméticas como las juntas de vidrio esmerilado
- Se aflojan fácilmente cuando es necesario
- Compatibles con los tapones esmerilados DURAN® según DIN 12249

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

### DURAN® CASQUILLOS ROSCADOS

Tamaño nominal	Unidades por embalaje	N.º de ref.
NS 14/23	10	28 659 14 04
NS 19/26	10	28 659 19 01
NS 24/29	10	28 659 24 09
NS 29/32	10	28 659 29 06
NS 34/35	10	28 659 34 05
NS 45/40	10	28 659 45 04



### DURAN® BASES CON ANILLO

Tamaño nominal	Unidades por embalaje	N.º de ref.
NS 14/23	10	28 618 14 02
NS 19/26	10	28 618 19 08
NS 24/29	10	28 618 24 07
NS 29/32	10	28 618 29 04
NS 34/35	10	28 618 34 03
NS 45/40	10	28 618 45 02



### DURAN® BASES DE DESCARGA CON ANILLO

Tamaño nominal	Unidades por embalaje	N.º de ref.
NS 19/26	10	28 619 19 09
NS 29/32	10	28 619 29 05




# ACCESORIOS PARA LAS SUJECIONES ESMERILADAS DURAN® Y PARA RODAVISS®\*

## TAPÓN ROSCADO, ABIERTO

El tapón roscado abierto fija de forma fiable la base con el cuerpo. Al abrir la unión roscada, las sujeciones esmeriladas se separan automáticamente.


Para el tamaño nominal	Unidades por embalaje	N.º de ref.
NS 14	10	28 621 50 01
NS 19	10	28 621 52 07
NS 24	10	28 621 53 01
NS 29	10	28 621 54 04
NS 34	10	28 621 55 07
NS 45	10	28 621 57 04

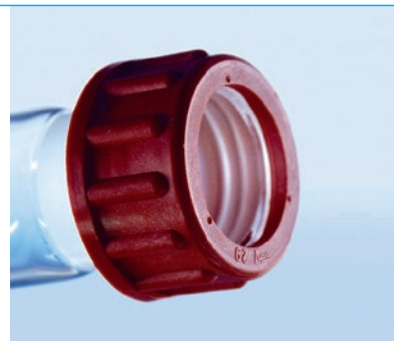

## JUNTA TÓRICA

Las juntas tóricas de nitrilo para las sujeciones esmeriladas DURAN®, en combinación el tapón roscado, fijan de forma segura la base y el cuerpo.

Para el tamaño nominal	Unidades por embalaje	N.º de ref.
NS 14	10	28 621 68 03
NS 19	10	28 621 70 02
NS 24	10	28 621 72 08
NS 29	10	28 621 74 05
NS 34	10	28 621 75 08
NS 45	10	28 621 77 05

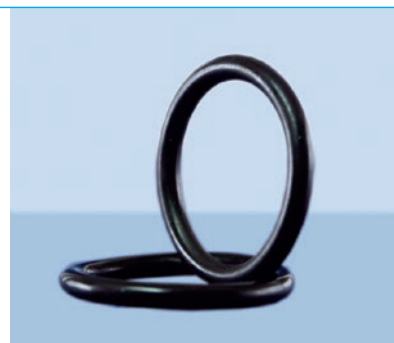

## ANILLO DE CIERRE POR TRACCIÓN

Los anillos de cierre por tracción tienen unas propiedades de deslizamiento excelentes. Así, gracias a la distribución homogénea de las fuerzas, ayudan a aflojar las sujeciones esmeriladas.


Para el tamaño nominal	Unidades por embalaje	N.º de ref.
NS 14	10	28 621 64 09
NS 19	10	28 621 69 06
NS 24	10	28 621 71 05
NS 29	10	28 621 66 06
NS 34	10	28 621 73 02
NS 45	10	28 621 67 09



## TAPÓN ROSCADO, CERRADO

Los tapones roscados cerrados permiten cerrar los diferentes elementos de forma segura después de su uso. La junta de silicona con recubrimiento de PTFE garantiza una máxima resistencia a las sustancias químicas.

Para el tamaño nominal	Unidades por embalaje	N.º de ref.
NS 14	10	28 621 42 02
NS 19	10	28 621 43 05
NS 24	10	28 621 44 08
NS 29	10	28 621 45 02
NS 34	10	28 621 46 05
NS 45	10	28 621 47 08

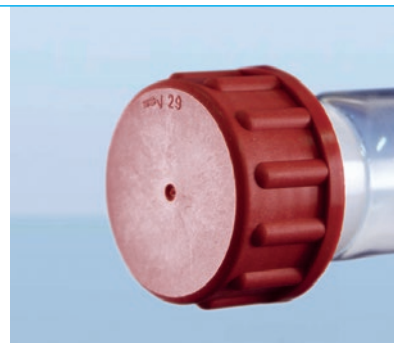

\* RODAVISS® es una marca registrada de SAS SOUFFLAGE ARTISANAL DU VERRE



DWK Life Sciences GmbH  
Otto-Schott-Str. 21  
97877 Wertheim / Main  
Alemania

Teléfono: +49 9342 - 802 214  
Fax: +49 9342 - 802 250  
glassblowers@DWK-LifeSciences.com  
www.DWK-LifeSciences.com

