



RODAGES DE SÉCURITÉ DURAN®

Les clips de fermeture KECK™ pour rodages sont connues et éprouvées. Lorsque les exigences de sécurité sont élevées, par exemple en cas de manipulation de substances dangereuses ou lors du travail avec des différences de pression, les rodages de sécurité DURAN® assurent une excellente protection contre le desserrage accidentel de l'assemblage. Par ailleurs, les rodages de sécurité DURAN® offrent également des solutions de desserrage des assemblages bloqués. Ceci permet de réduire le risque de casse du verre et les risques y afférents.

DOMAINES D'APPLICATION

- Manipulation de substances dangereuses
- En cas de risque de blocage d'un rodage, par exemple en cas d'absence de graisse
- Pour les joints dépolis soumis à des charges mécaniques, par exemple en raison de leur position de montage ou des vibrations
- Pour une fermeture sécurisée des composants rodés

CARACTÉRISTIQUES

- Verre borosilicaté 3.3
- Assemblage sécurisant
- Aussi étanche que les rodages normalisés DURAN®
- Facile à desserrer en cas de besoin
- Compatible avec les rodages DURAN® selon DIN 12249

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

RODAGES FEMELLES FILETÉS DURAN®

Dimensions nominales	Qté / unité d'emballage	N° de cde
NS 14/23	10	28 659 14 04
NS 19/26	10	28 659 19 01
NS 24/29	10	28 659 24 09
NS 29/32	10	28 659 29 06
NS 34/35	10	28 659 34 05
NS 45/40	10	28 659 45 04



RODAGES MÂLES À COLLERETTE DURAN®

Dimensions nominales	Qté / unité d'emballage	N° de cde
NS 14/23	10	28 618 14 02
NS 19/26	10	28 618 19 08
NS 24/29	10	28 618 24 07
NS 29/32	10	28 618 29 04
NS 34/35	10	28 618 34 03
NS 45/40	10	28 618 45 02



RODAGES MÂLES AVEC ÉCOULEMENT À COLLERETTE DURAN®

Dimensions nominales	Qté / unité d'emballage	N° de cde
NS 19/26	10	28 619 19 09
NS 29/32	10	28 619 29 05




ACCESSOIRES POUR RODAGES DE SÉCURITÉ DURAN® ET POUR RODAVISS®*

CAPUCHON À VIS, OUVERT

Le capuchon à vis ouvert fixe le rodage fileté dans la douille. Lors de l'ouverture du capuchon, les rodages sont automatiquement séparés.


Pour la dimension nominale	Qté / unité d'emballage	N° de cde
NS 14	10	28 621 50 01
NS 19	10	28 621 52 07
NS 24	10	28 621 53 01
NS 29	10	28 621 54 04
NS 34	10	28 621 55 07
NS 45	10	28 621 57 04

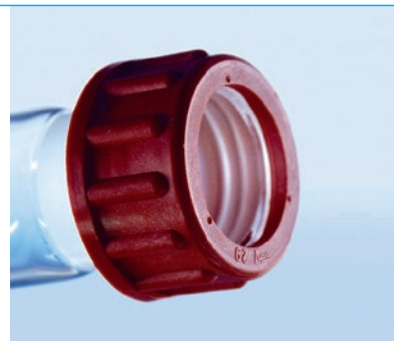

JOINT TORIQUE

Les joints toriques en nitrile pour rodages de sécurité DURAN® assurent, avec le capuchon fileté, l'assemblage du capuchon et du rodage.

Pour la dimension nominale	Qté / unité d'emballage	N° de cde
NS 14	10	28 621 68 03
NS 19	10	28 621 70 02
NS 24	10	28 621 72 08
NS 29	10	28 621 74 05
NS 34	10	28 621 75 08
NS 45	10	28 621 77 05

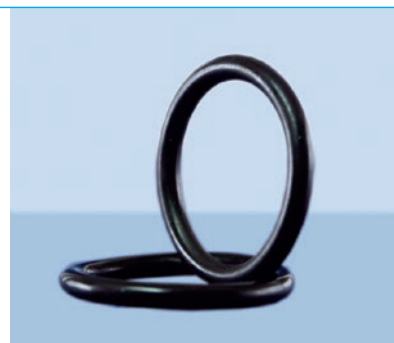

CLIP DE DÉBLOCAGE

Les clips de déblocage en polyamide ont d'excellentes propriétés de glissement. Grâce à leur répartition uniforme des forces, elles aident à desserrer en sécurité les rodages bloqués.


Pour la dimension nominale	Qté / unité d'emballage	N° de cde
NS 14	10	28 621 64 09
NS 19	10	28 621 69 06
NS 24	10	28 621 71 05
NS 29	10	28 621 66 06
NS 34	10	28 621 73 02
NS 45	10	28 621 67 09



CAPUCHON FILETÉ, FERMÉ

Les capuchons filetés fermés permettent d'obturer l'équipement de façon sécurisée après utilisation. Le joint en silicone à revêtement en PTFE présente une résistance chimique optimale.

Pour la dimension nominale	Qté / unité d'emballage	N° de cde
NS 14	10	28 621 42 02
NS 19	10	28 621 43 05
NS 24	10	28 621 44 08
NS 29	10	28 621 45 02
NS 34	10	28 621 46 05
NS 45	10	28 621 47 08

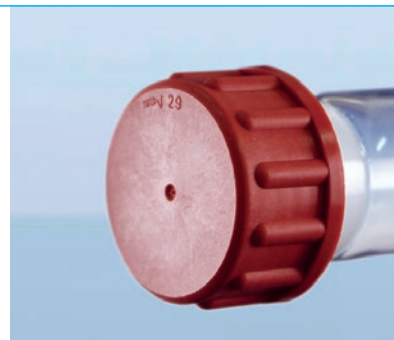

*RODAVISS® est une marque déposée de SAS SOUFFLAGE ARTISANAL DU VERRE



DWK Life Sciences GmbH
Otto-Schott-Str. 21
97877 Wertheim / Main
Allemagne

Tél. : +49 9342 - 802 214
Fax : +49 9342 - 802 250
glassblowers@DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

